


## M32 – modul 3F centrální vypínač jištění, proudový chránič, tlačítko stop, 3x 400VAC

### popis

Modul slouží k zapínání, vypínání a jištění podřízených modulů nástavby. Jedná se o základní prvek, nutnou součást každé přístrojové nástavby VarioLAB+ s napájením třífázovou soustavou. Zapnutí napájení se provádí stiskem zeleného tlačítka ZAP (Start) a vypnutí stiskem červeného tlačítka VYP (Total STOP). Stop tlačítko je vybaveno aretací, před dalším zapnutím stolu je třeba jej pootočením uvolnit. Zapnutí a vypnutí napájení je akusticky signalizováno jedním pípnutím při zapnutí a dvěma krátkými při vypnutí. Bezpečnost je dále zvýšena žlutě podsvíceným prstencem u tlačítka Total STOP. Modul kromě jističe, proudového chrániče a signalizační kontrolky zapnutí modul též obsahuje kompletní inteligentní sběrnici Quick-connect, sloužící k připojení většiny elektrické výbavy přístrojové nástavby. Modul též obsahuje blokování samočinného zapnutí po výpadku proudu (po výpadku proudu je třeba pro opětovné sepnutí napájení stisknout tlačítko ZAP). Modul je dále vybaven podřízeným vypínačem, který slouží k ovládání externího svítidla (svítidlo není součástí dodávky modulu M32).

Vyobrazení modulu:

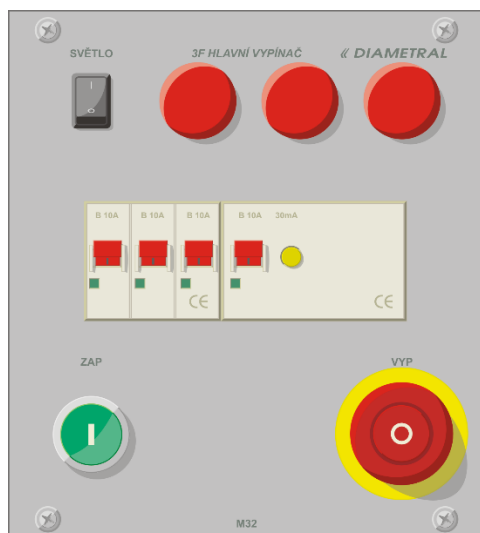

### parametry

rozměr:	200 x 180 mm
barva:	šedá
jištění:	3F B16A
proudový chránič 4P:	4 póly, 30mA
signalizace:	kontrolkami
napájecí napětí:	3 x 400 VAC

**Diametral a.s.**  
Václava Špačka 1759  
193 00 Praha - Horní Počernice  
Česká republika

tel.: +420 222 360 423  
fax: +420 222 365 493  
e-mail: [info@diametral.cz](mailto:info@diametral.cz)  
URL: [www.diametral.cz](http://www.diametral.cz)